

# Een bewezen keus

**Bellovac® ABT**

YOUR OWN BLOOD



## Hoogstaande kwaliteit

Bellovac®ABT heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot het meest gebruikte en best gedocumenteerde systeem voor reïfusie van autoloog bloed. Niet alleen vanwege de superieure kwaliteit van een veilig en gesloten systeem, maar ook vanwege de eenvoud van handelen met een alles-in-één systeem voor bloedopvang en reïfusie.



## Optimale veiligheid

Reïfusie van autoloog bloed wordt aanbevolen bij postoperatieve bloeding na chirurgische ingrepen. Bellovac®ABT is een gesloten en veilig systeem met drie ingebouwde terugslagkleppen. Dat biedt een maximale veiligheid voor patiënt en verpleging.



## Verkozen door velen

Bellovac®ABT is eenvoudig en makkelijk in gebruik. Het vereist geen kostbare apparatuur of gespecialiseerd personeel. Dankzij de tweeledige functie zijn aanvullende drainagesets overbodig. Wanneer u het systeem eenmaal geprobeerd hebt, zult ook u kiezen voor Bellovac®ABT.



## Compleet en gebruiksklaar

De Bellovac®ABT Set is compleet en gebruiksklaar. De set bevat een trocar, katheter, laagvacuüm zuigbalg, autotransfusiezak en transfusieset. Alle componenten, behalve de trocar, zijn uitsluitend bedoeld voor éénmalig gebruik. De Bellovac®ABT productenlijst omvat alle noodzakelijke accessoires.

# Dit is Bellovac® ABT


**In- en uitlaatklemmen**  
Veiligheidsklemmen,  
eenvoudig in gebruik.

**Zuigbalg**  
De zuigbalg kan worden  
gevuld tot maximaal 220 ml.  
De initiële negatieve druk  
is 90 mmHg / 12 kPa.

**Drie terugslagkleppen**  
Ter bescherming van  
patiënt en verpleging  
bevat Bellovac® ABT drie  
terugslagkleppen. Eén in de  
inlaat van de zuigbalg, één in  
de uitlaat van de zuigbalg en  
één in de inlaat van de auto-  
transfusiezak.

**Drievoudige filter**  
Er is een 200 µm  
macrofilter met groot  
oppervlak in de auto-  
transfusiezak en een  
40 µm en 80 µm micro  
dubbelfilter in de  
transfusieset.

Alle componenten zijn gemaakt van  
biocompatibel, pyrogeenvrij materiaal.

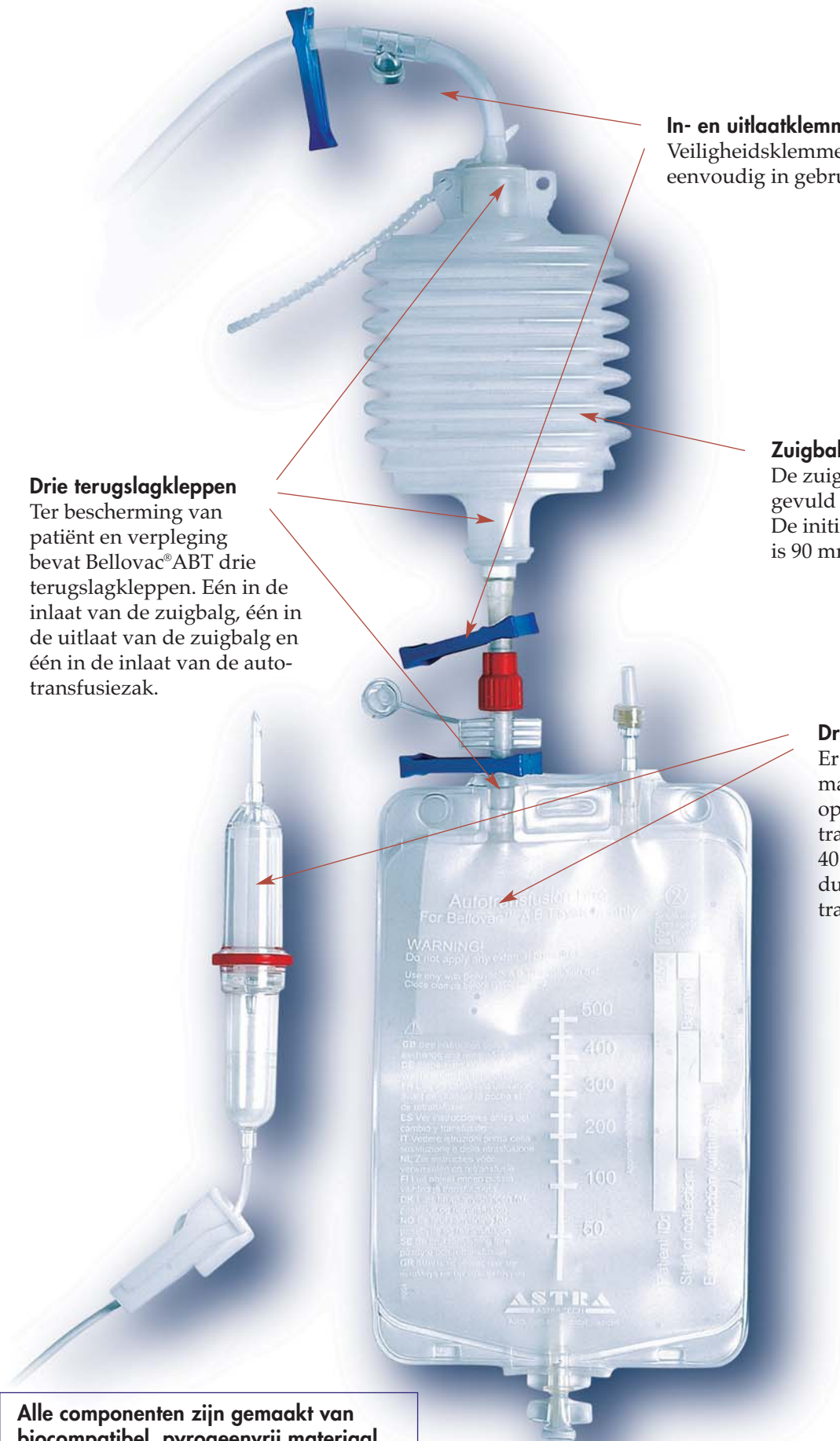

# Bellovac® ABT assortiment



## Compleet en gebruiksklaar

De Bellovac® ABT Set wordt compleet en steriel geleverd, gebruiksklaar voor de opvang en reïnfusie van één eenheid (500 ml) autoloog bloed.

Ref. No	Bellovac® ABT Set
68396 2x10	Bellovac® ABT Set FG 10 met trocar
68397 2x10	Bellovac® ABT Set FG 14 met trocar
68398 2x10	Bellovac® ABT Set FG 18 met trocar



## Aanvullende set voor extra opvang en reïnfusie

Indien de patiënt meer dan één eenheid (500 ml) bloed verliest, wordt deze extra set, bestaande uit een autotransfusiezak en een transfusieset, gebruikt.

Ref. No	Bellovac® ABT Accessoires
68379 4x5	companion set



## Verlenglijn

Zorgt ervoor dat het bloed van de patiënt in een gesloten circuit blijft. Dat kan om religieuze redenen gewenst zijn.

68380 4x5	verlenglijn
-----------	-------------



## Standaard drainagezakken

Zes uur na wondsluiting wordt de bloedopvang beëindigd en worden standaard drainagezakken gebruikt voor de resterende wonddrainage.

68337 1x50	wonddrainageopvangzak pvc-vrij, 700 ml
------------	--

## Overige accessoires

68381 1x20	transfusieset
68376 1x25	Y-connector met drain FG 10
68377 1x25	Y-connector met drain FG 14
68378 1x25	Y-connector met drain FG 18
68385 1x25	Y-connector met drain FG 10 met trocar
68386 1x25	Y-connector met drain FG 14 met trocar
68387 1x25	Y-connector met drain FG 18 met trocar

CE 0088

STERILE EO




Single use/Usual Unico/  
Einmalgebrauch/Usage unique

## Referenties

An algorithm to reduce allogenic red blood cell transfusions for major orthopaedic surgery, Slappendel R, Dirksen R, Weber EW, van der Schaaf DB, Acta Orthop Scand. 2003 Oct; 74(5): 569-75.

Clinical efficacy of post-operative autotransfusion of filtered shed blood in hip and knee arthroplasty, Weber EWG, Gielen-Wijffels S, Van Drumpt R, Bulstra S, Slappendel R, Durieux ME, Marcus MAE, Medical Thesis 2003: Optimized blood management for elective orthopaedic surgery, Weber EWG, ISBN 90 5278 394 2.

Complement split products and pro-inflammatory cytokines in salvaged blood after hip and knee arthroplasty, Andersson I, Tylman M, Bengtson JP, Bengtsson A, Can J Anesth. 2001 Mar; 48(3): 251-5.

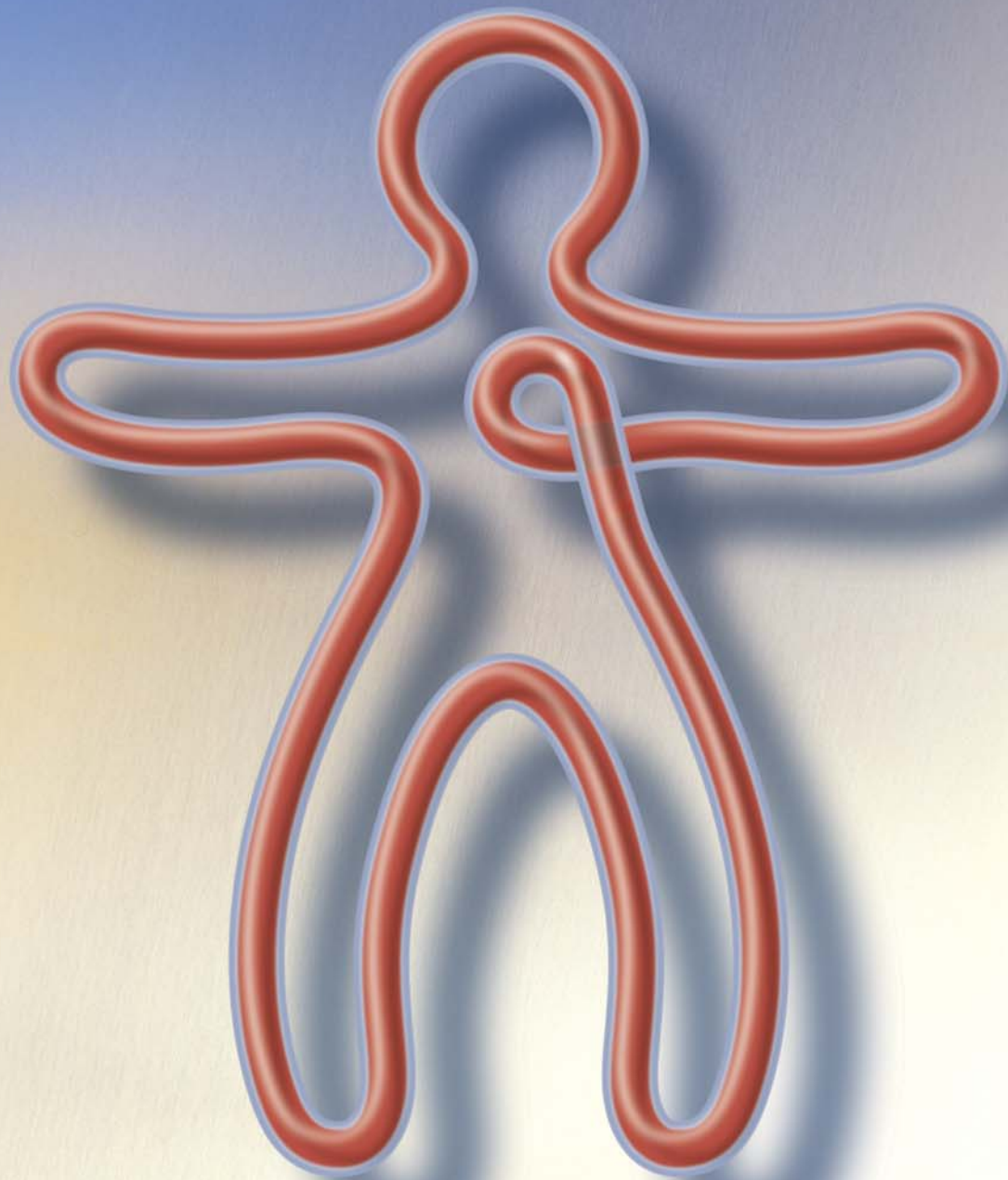

# Vertrouw op uw eigen bloed

Transfusie van homolog (allogeen) bloed van de bloedbank is niet geheel zonder problemen en risico's. Er is een voortdurend tekort bij de bloedbanken en het opgeslagen bloed zou het beste voor spoedeisende hulp en voor situaties, waarin geen alternatieven zijn, beschikbaar kunnen blijven.

Het gebruik van autoloog (uw eigen) bloed is toepasbaar bij predonatie, haemodilutie en intra- en postoperatieve autotransfusie.

Bellovac®ABT is bedoeld voor autologe reïnfusie van het eigen bloed, dat bij de patiënt na afloop van de operatie opgevangen wordt.



**A**STRA TECH SURGERY SUPPORT is een concept dat ondersteuning biedt samen met onze producten. Wij bieden u niet alleen topkwaliteit producten, die geschikt zijn voor een breed scala aan chirurgische toepassingen, maar ondersteunen u met moderne logistiek, training en technische en educatieve programma's. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft over autologe bloedtransfusie. Wij willen u graag van dienst zijn.

CE 0088

